
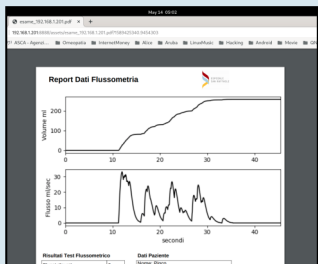


Riabilitazione

Sistema computerizzato

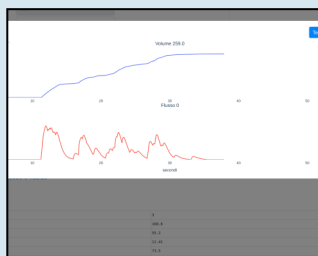

Computer integrato
Sistema Operativo
Linux 16 bit Multi
Tasking Display a
colori 10" Touch-
Screen collegamen-
to diretto con mo-
dulo WI-FI per la
riabilitazione **Bio-
feedback** o inte-
grazione **EMG** con

Uroflussometria Calcoli eseguiti secondo lo
standard I.C.S (International continence so-
ciety) inserimento del referto conclusioni
modalità di esecuzione dell'esame e molto
al-



Trasduttore di Flusso Wireless



Portata massimo del tra-
sduttore 1 Litro. Il trasdut-
tore di Flusso ha alcune
funzioni speciali, quale la
taratura digitale che puo'
eseguire l'operatore senza
dover consultare un tecni-
co, il controllo del peso in
tempo reale per poter
avere sempre il trasduttore
con la perfetta taratura.



Trasduttore di Flusso :

Pastificato su struttura portante regolabile in altezza cava' posi-
zionamento Beker da 1 Litro graduato e Porta imbuto. Elettronica
integrata con modulo di trasferimento Dati in modalita' wire-
less e batteria interna ricaricabile da 3,7V al lithio completo di
carica batteria 5V 2.A Il sistema può funzionare anche durante la
carica della batteria. Portata del segnale fino a 50-80 M dall'appa-
recchiatura salvo impedimenti dovuti alle strutture dell'ambiente
in cui viene installato. Antenna integrata nel dispositivo. Sedia
pieghevole con appoggia braccia regolabile in altezza per la min-

EV.SERVICE ITALIA SRL

Indirizzo ufficio Via Imbiani 2/D
40017 San Giovanni in Persiceto (Bologna)
Italy
Zona artigianale
Stabilimento Produzione Assistenza Tecnica
Tel.: + 39 51 728836
Posta elettronica: info@evserviceitalia.it
Web Site : www.evserviceitalia.org


MEDICAL
EV.SERVICE ITALIA
EQUIPMENT

New 2024

MEDICAL
EV.SERVICE ITALIA
EQUIPMENT

Uroflussimetro Wireless Flowline Plus Mod- Desk 2 in uno

*Tecnologia all'Avanguardia per aiutarVi
ad aiutare gli altri...!!*

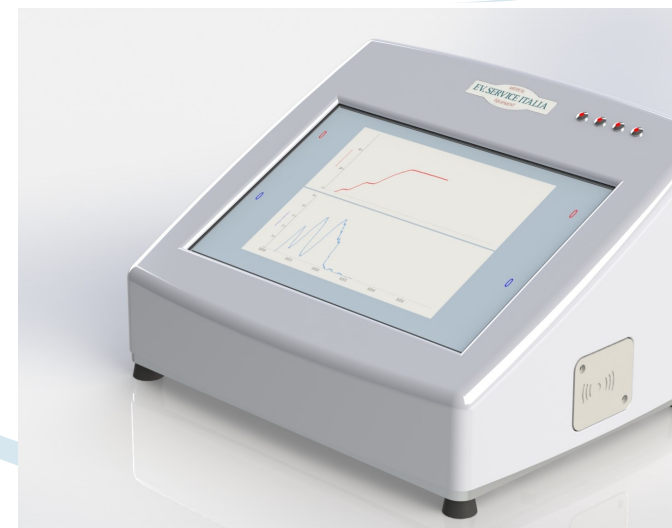

**Per contatti immediati
tel + 39 51 728836**

funzioni del sistema Flowline Desk

Sistema Computerizzato con S.O Linux

Sistema Flowline Desk può funzionare sia in modo **automatico che manuale**. L'operatore può scegliere la modalità di esecuzione dell'esame a seconda delle proprie esigenze può scegliere di associare ai tracciati della Flussometria il Segnale **EMG** oppure eseguire il Test per la riabilitazione **Biofeedback**.

Molte sono le funzioni del software per eseguire i vari test

- 1) Impostazione dei parametri della Post-Minzione. Modalità di visualizzazione dei tracciati, scelta dei report
- 2) Nomogrammi di Siroky-Liverpool e Bristol dinamici a secondo dell'età e del sesso
- 3) Memorizzazione dell'esame in automatico nel suo hard disk
- 4) Archivio degli esami dove l'operatore può recuperare i test effettuati e ristamparli o refertarli in un secondo momento
- 5) Analisi dei tracciati, calcolo automatico dei picchi massimi direttamente sulle curve, sovrapposizione delle curve, inserimento marker Videata di confronto multi tracciati per singolo paziente nel tempo statistiche e molto altro
- 6) Parametri configurabili per il Biofeedback e EMG
- 7) Carrellino multi piano per posizionamento dello strumento
- 8) Stampante Laser o a Getto d'inchiostro **LCD Touch-screen 10" COLORI A LED**

RAM 8GB MICRO SD 128 GB 2 USCITE USB

WI-FI BLUETOOTH

Fornito con tastiera a supporto

Alimentatore Medica 24V 2.5A

Parametri del Flowline Desk.

Flussi rilevati

Volume Svuotato

(da 0 a 1000 ml)

QMax

(da 0 a 50 ml/sec)

Scala manuale fissa o automatica sia del Volume che del Flusso per avere maggiore chiarezza dei tracciati e vedere i particolari dell'andamento delle curve)

QMedio

Tempo al QTotale

(espresso in secondi)

Tempo di Svuotamento

(espresso in secondi)

Tempo di attesa

Tempo di pausa

(espresso in secondi)

Emg valore massimo e medio

Diagnosi secondo Siroky-liverpool-Bristol

(**Diagnosi del grado di Ostruzione Dubbio-ostruito-non ostruito**)

Riconoscimento degli artefatti durante l'elaborazione dei dati ad alta risoluzione

Inserimento marker elaborazioni tracciati


Inserimento dei dati del paziente tramite tastiera touch o USB

Inserimento della patologia

Altre funzioni...

Inserimento tramite tastiera dei Dati dell'operatore e intestazione ENTE/Studio ettc. Taratura da software per un maggior controllo funzionale della periferica wireless. Biofeedback con parametri impostabili dall'operatore. Registrazione delle varie contrazioni rispetto al livello pre-impostato del target da raggiungere della forza massima del paziente. Guida vocale durante l'esecuzione dell'esame. Report Finale

MEDICAL
EV.SERVICE ITALIA
EQUIPMENT

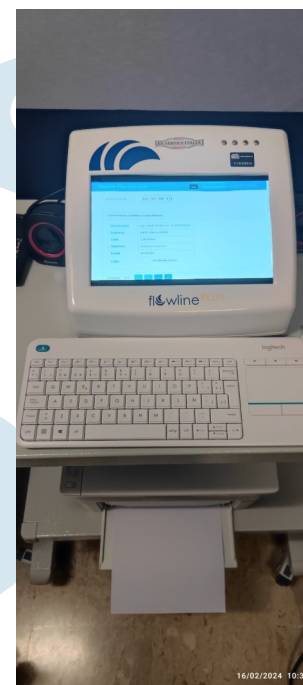

Modulo WI-FI EMG-Biofeedback



EV.SERVICE ITALIA SRL

Indirizzo ufficio Via Imbiani 2/D
40017 San Giovanni in Persiceto (Bologna)
Italy
Zona artigianale

Tel.: + 39 51 728836

Fax: + 39 51 7417254

Posta elettronica: info@evserviceitalia.it

Web Site : www.evserviceitalia.org